


Smartwatch oscillometrico

Monitoraggio completo della salute
al polso:

- Pressione arteriosa
- Patient tracking

Cod. **ABX-Swo**
Ref. U16P

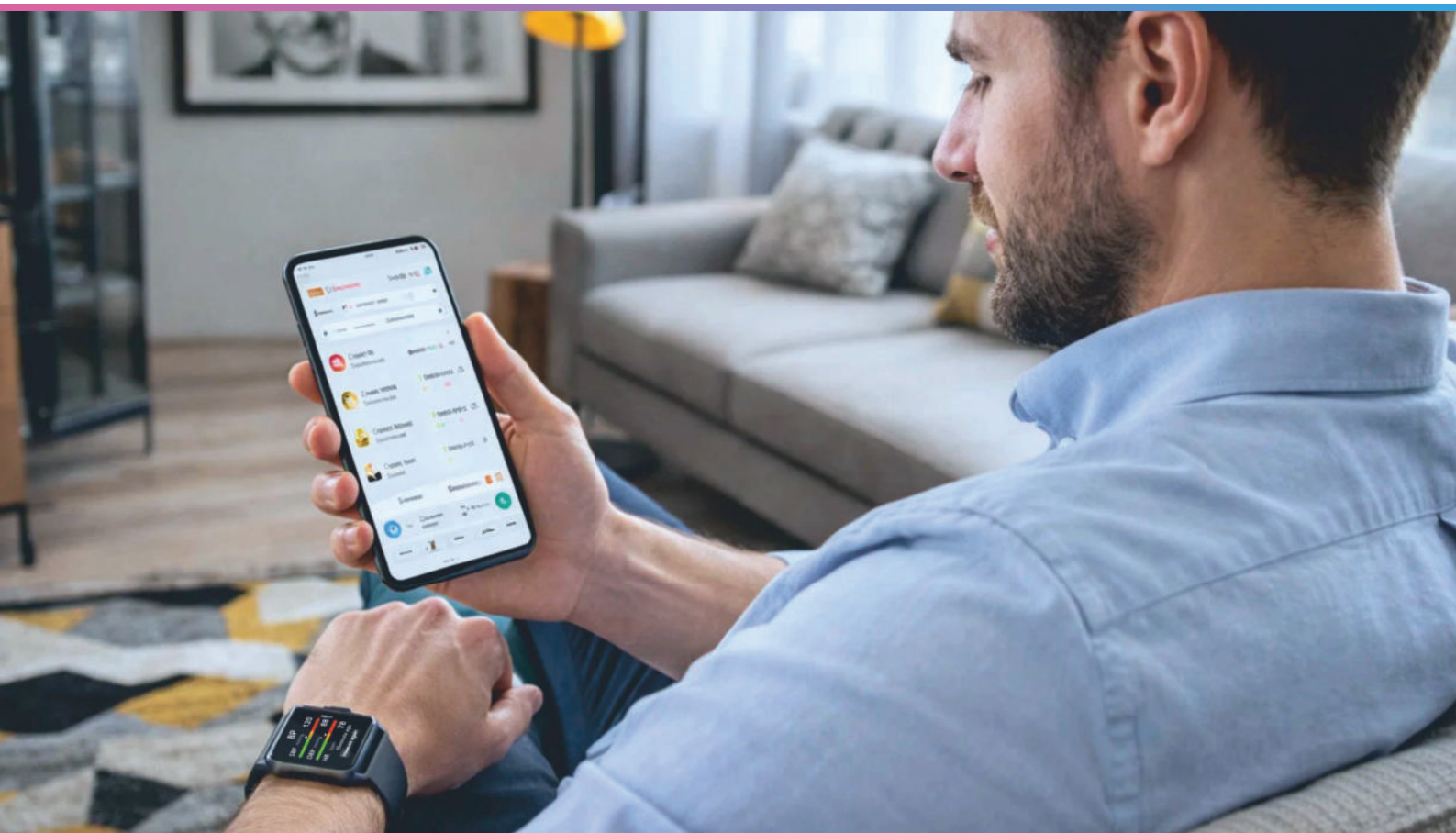

Visita il nostro sito

another way to care

Live Capture Smartwatch oscillometrico


Smartwatch con Misurazione Oscillometrica della Pressione

Lo smartwatch con tecnologia oscillometrica integrata consente di misurare la pressione sanguigna sistolica e diastolica direttamente al polso, grazie a un micro-cuff gonfiabile simile a quello dei dispositivi medici tradizionali.

Oltre alla pressione, monitora frequenza cardiaca, saturazione di ossigeno (SpO₂), attività quotidiana e qualità del sonno, offrendo una visione completa del tuo stato di salute.

Il display ampio e luminoso garantisce una lettura immediata dei dati, mentre la connessione Bluetooth permette la sincronizzazione con l'App dedicata, per consultare lo storico delle misurazioni e seguire l'andamento nel tempo.

Elegante, pratico e intuitivo, è la soluzione ideale per il monitoraggio quotidiano della salute cardiovascolare, a casa e in mobilità.

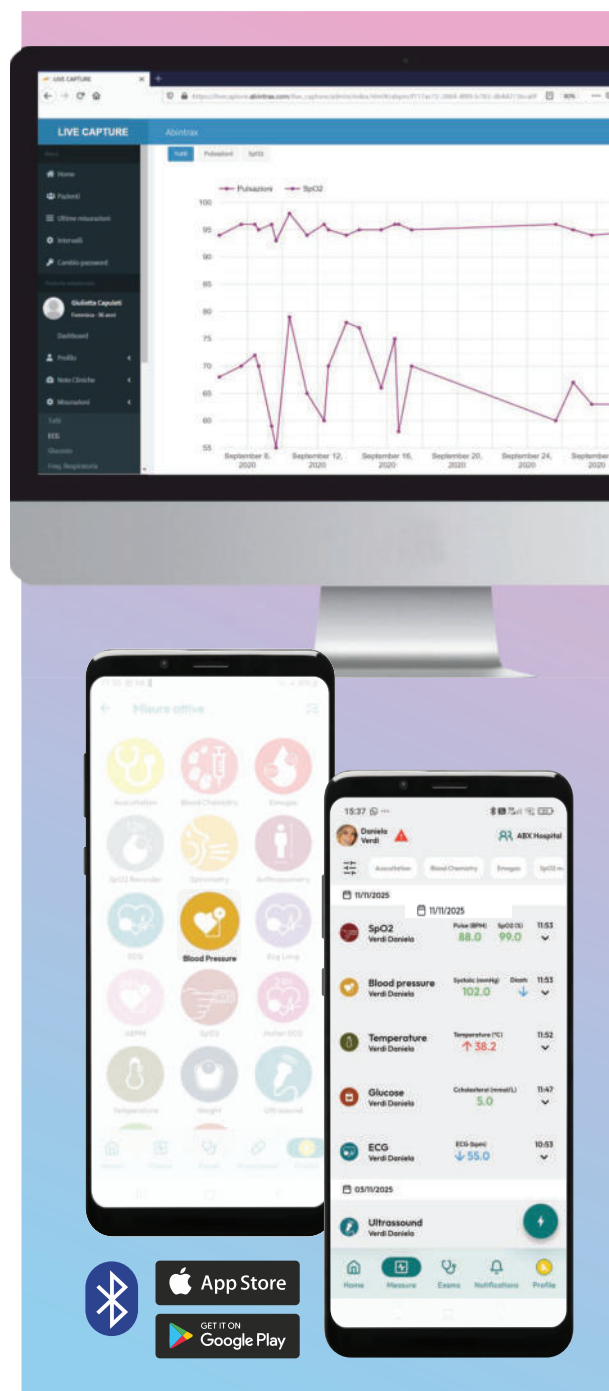

Caratteristiche

- Misura la pressione sanguigna, l'ossigeno nel sangue e la frequenza cardiaca
- Metodo di misurazione oscillometrico del bracciale
- Display TFT da 1,7"
- Messaggi vocali integrati (inglese e cinese)
- Monitoraggio del sonno
- Promemoria scientifici sui movimenti
- Promemoria per i farmaci
- Funzione di decompressione respiratoria
- Monitoraggio dell'attività
- Connettività Bluetooth con app mobile
- Gonfiaggio e sgonfiaggio automatici
- Ricarica magnetica

MDR (EU) 2017/745 Classificazione: Classe IIa;
Dispositivo medico registrato nell'elenco del
ministero della salute

CND: Z1203020501 - MISURATORI NON INVASIVI
DELLA PRESSIONE ARTERIOSA OSCILLOMETRICI

REGISTRAZIONE ID
IDENTIFICATIVO DI REGISTRAZIONE BD/RDM:
2984714

Misura la pressione sanguigna sempre e ovunque utilizzando il metodo oscillometrico: gonfia l'airbag per bloccare il flusso sanguigno, rileva i cambiamenti di oscillazione durante lo sgonfiaggio e utilizza algoritmi clinici per ricavare la pressione sistolica e diastolica.

Trasmissione vocale (on/off), interruttore Italiano/Inglese, ossigeno nel sangue, frequenza cardiaca, monitoraggio del sonno, contapassi, Bluetooth 5.0.

Batteria al litio da 310 mAh: standby ~7 giorni, utilizzo normale 3-4 giorni, tempo di ricarica circa 1,5 ore.



Pressione arteriosa



% Ossigeno nel sangue



Frequenza cardiaca AFIB



Attività giornaliera



Monitoraggio del sonno



Promemoria assunzione terapia



Rilevazione movimento



Frequenza respiratoria



Monitoraggio calorie



Messaggio vocale

Specifiche Tecniche

Nome e modello	Smartwatch oscillometrico ABX-Swo
Display	TFT da 1,7 pollici
Processore	Realtek
Sensore	Frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, sensore di pressione digitale, accelerometro
Capacità della batteria	320 mAh
320 mAh	Tipo magnetico
Materiale del dispositivo	Lega di zinco + ABS
Dimensioni del dispositivo	15,3*38,6*53,3 mm
Lingua di supporto	Inglese/Italiano
Durata della batteria	Modalità normale 7-10 giorni
Metodo di misurazione	Metodo di misurazione dell'oscilloscopio
Campo di misura	Pressione: 0~300mmHg (0~40kPa) Impulso: 40~180 BPM
Precisione di misurazione	Pressione: ± 3 mmHg Polso: $\pm 5\%$ della lettura
Metodo di pressurizzazione	La pompa di pressione pressurizza automaticamente
Modalità di sgonfiaggio	Scarico rapido automatico
Circonferenza del polso	15 cm~21 cm





Scarica il catalogo completo



Scopri l'ecosistema **Live capture**
su **healthlivecapture.com**

Concessionario

